

A woman with blonde hair is sitting on a white surface, smiling. She is wearing an orange sleeveless top and grey pants. On her right arm, she is wearing a blue compression sleeve with the JOBST logo on it. The sleeve has a black cuff at the wrist. The background shows a bathroom with a sink and a mirror.

Nachtcompressie voor complexe casuïstiek

JOBST® JoViPak

Oplossingen voor het hele lichaam

Oplossingen voor het hele lichaam

In de onderhoudsfase kan het onder controle houden van lymfoedeem een uitdaging zijn voor de patiënt en behandelaar. Als er sprake is van pittig oedeem dat zelden verdwijnt door hoog leggen met eventueel beginnende fibrose dan kan een compressiehulpmiddel gedurende de nacht uitkomst bieden.

JOBST JoViPak bevat foamdeeltjes van wisselende grootte die zorgen voor puntdruk en zijn ontworpen om lymfevocht af te voeren en fibrotisch weefsel te verzachten. Het compressiehulpmiddel is speciaal ontworpen voor inzet bij harde fibrose gedurende de nacht, en is inzetbaar vanaf ISL 2b*.

Zet nachtcompressie altijd in als onderdeel van het behandelplan, passend bij de gezamenlijk vastgestelde therapiedoelen om therapietrouw te bevorderen.



* The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology

Compressie waar dat nodig is

Hoofd, nek en kin

Confectie:

- Kinband standaard en uitgebreid
- Half- en volledig gezichts- en nekmasker
- Pads nek
- Pads oor

(geen maatwerk beschikbaar)

Torso

Maatwerk:

- Schouder-Thorax verband - met of zonder padding
- Busti
- Vest

Confectie:

- Borst en borstwand

Schaamstreek

Confectie:

- Genitale pads (zowel voor mannen als voor vrouwen)

(geen maatwerk beschikbaar)

Bovenste ledematen

Maatwerk:

- Armverband - in één of twee delen
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

Onderste ledematen

Maatwerk:

- Beenverband - hele been of onderbeen
- Hip Hugger
- Boxer Short
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

JOBST JoViPads en JOBST PitPaks kunnen voor behandeling overal op het lichaam worden gebruikt.

JOBST® JoViPak materiaalsopties

JoViPak® stoffen

- JoViPak Arm- en Beenverband, Schouder-Thorax, Busti: Polartec® PowerDry®, gemaakt van 100% polyester microvezelgarens. De Polartec® Powerdry® draagt comfortabel dankzij de dempende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen eigenschappen. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid.
- JoViJacket: Powernet, gemaakt van nylon met spandex®, een sterk materiaal met beperkte rek.
- JoViPak Hip hugger, Vest, en de Hoofd, nek- en kinverbanden: gemaakt van 90% katoen en 10% Lycra®.

Foam

JoViPak schuim:

- Bromidevrij
- Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte
 - 2 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Slimline kanalen
 - 4 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Standaard kanalen

Kanalen

- Standaard - ruim 3 cm tussen kanalen (4 blend foam)
- Slimline - 2,5 cm tussen kanalen (2 blend foam)
 - Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner. Bv bij Armverband

JOBST® PitPaks

De PitPaks zijn voor 100% van natuurlijk materiaal. JOBST PitPaks worden niet vergoed en dient de patiënt zelf te betalen.

Bovenste ledematen

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager



Maatwerk: JoViPak Armverband

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief lymfoedeem management van de arm gedurende de nacht, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. Comfortabel, duurzaam en eenvoudig aan te doen.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard of Slimline

Opties: Armverband in één of twee delen, rits, gestikte vingers.

Arm					
AC1	AE	AD	AG	AG1	CG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor extra compressie bij het JoViPak Armverband.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het armverband.

Materiaal	Powernet				
Kleur	Black		White		

Hoofd, nek en kin

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager



Confectie: Kinband standaard

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. Het bedekt gedeeltelijk de oren.


Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad Universeel aan indien gewenst.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		

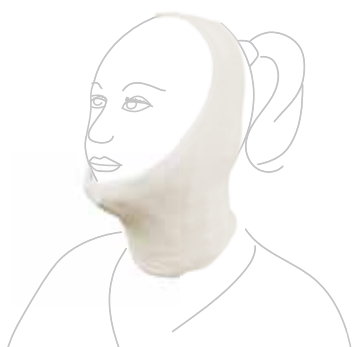

Confectie: Kinband uitgebreid

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. Het bedekt de oren, de zijkant van het gezicht en achter de oren.


Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		

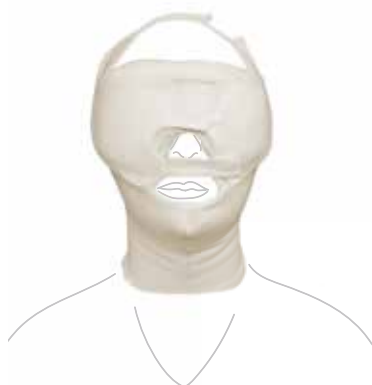

Confectie: Gezichts- en nekmasker

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. Het bedekt het hele gezicht, behalve de neus en de mond.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: Half gezichts- en nekmasker inclusief padding rechts

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Half gezichts- en nekmasker inclusief padding links**

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Nekpad universeel**

Bedekt nek en achterkant oor.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Nekpad Peri Auricular**

Bedekt nek + voor- en achterkant oor. Geschikt voor kinband uitgebreid en gezichts- en nekmasker.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Oogpad (+ band)**

Geschikt voor gezichts- en nekmasker.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		

Torso

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager



Schouder-Thorax met thorax padding



Schouder-Thorax zonder thorax padding

Maatwerk:

JoViPak Schouder-Thorax Links/Rechts

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en oedeem rondom de schouder en/of bovenlichaam hebben, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Type: Mastectomie, Lumpectomie, Reconstructie.

Kanalen: Standaard of Slimline, horizontale of verticale kanalen.

Opties: Met of zonder padding, armverband in één of twee delen, arm sling, rits, gestikte vingers.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Schouder-Thorax met JoViJacket
Voor extra compressie

Maatwerk:

JoViJacket Schouder-Thorax


Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Schouder-Thorax.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het Schouder-Thorax product.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			

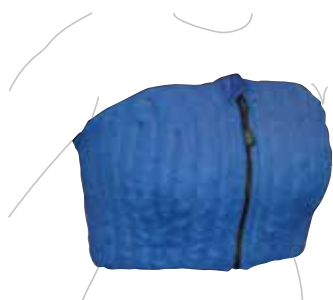

Maatwerk: JoViPak Busti

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten waarbij een lumpectomie is uitgevoerd, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.
Voor mastectomie patiënten adviseren wij het Vest met eventueel een P-PI pad voor de ontbrekende borst.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

De Busti wordt altijd in Slimline uitvoering geleverd.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket Busti

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Busti.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Vest

Wanneer inzetbaar:

Aanbevolen voor patiënten met borstwandoedeem en fibrose na een lumpectomie of mastectomie.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard (met 4 soorten schuim) of Slimline (met 2 soorten schuim); verticaal of horizontaal.

Opties: Halve of volledige vulling, rits, kortere versie (tot de taille).

Materiaal	Katoen/Lycra®					
Kleur	Black		Ivory		Royal Blue	



Confectie: JoViPad Post-Lumpectomy

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem en/of stralingsfibrose van de aangedane borst en/of borstwand. De pad bedekt de aangetaste borst volledig en strekt zich uit tot aan de wervelkolom. Past onder de meeste sport- of compressiebeha's. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Post-Mastectomy

Wanneer inzetbaar:

Voor borstwandoeedeem en/of stralingsfibrose na een mastectomie. De pad bedekt de aangedane borstwand helemaal. Kan gebruikt worden onder een mastectomie beha. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Serratus Anterior

Wanneer inzetbaar:

Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of standaard beha's. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: **JoViPad Belisse Axilla mini**

Wanneer inzetbaar:

Voor compressie in de oksel. Een losjes gevulde pad met verlengstuk. Past in de meeste sport- of compressiebeha's. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: **JoViPad Belisse Inframammary**

Wanneer inzetbaar:

Voor fibrose van de borst en/of rondom de borst. De ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus en geeft zachte compressie aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een sport- of compressiebeha gebruikt worden. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Genitale Vrouw

Wanneer inzetbaar:

Voor labia oedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde pad met gestikte patroon is ontworpen om lymfevocht van de pubis weg te voeren.

Beschikbare in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Genitale Man

Wanneer inzetbaar:

Voor scrotumooedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde pad met gestikte patroon is ontworpen om lymfevocht van het testesgebied weg te voeren.

Beschikbare in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal	Polartec® Power Dry®		
Kleur	Buff		

Onderste ledematen

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager



Maatwerk: JoViPak Beenverband

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief lymfoedeem management van het been gedurende de nacht, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.

Comfortabel, duurzaam en eenvoudig aan te doen.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Opties: Tot de tenen, rits.

Been					
AB1	AD	AF1	AG	AG1	DG1

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij het JoViPak Beenverband, met antislipzool.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Boxer

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem. Kan met een beenverband gecombineerd worden. Ontworpen om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Boxer, al dan niet in combinatie met een beenverband.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: **JoViPak Hip hugger**

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die hoog op het been tot in de heup oedeem hebben, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren. Comfortabel dankzij het polsterend effect.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Ivory		Royal Blue	



Aantrekhelp

Wanneer inzetbaar:

Als hulpmiddel voor het aantrekken van een JoViPak kledingstuk.



Confectie: JoViPad Foam POP

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen om lokaal druk te verhogen en comfort te verschaffen door hun dempende werking bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze ovale JOBST JoViPad is geïndiceerd voor gebruik in de gevoelige knieholte of voorzijde van de enkel. De pad is ook geïndiceerd voor patiënten die lokaal druk moeten hebben op de voetrug of andere kleine gebieden met fibrose waarop druk wordt uitgeoefend.

Beschikbare in de volgende maten:

Eén maat: 12,5 x 20 cm



Materiaal	Stof: 91% biologisch katoen, 9% elastaan (spandex)		
	Vulling: 100% polyurethaan		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Foam KDNY

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen om lokaal druk te verhogen en comfort te verschaffen door hun dempende werking bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze niervormige pad is geïndiceerd voor gebruik in gebieden zoals de laterale borst ter hoogte van de oksel, de distale voorzijde van de knie, de binnenkant van het bovenbeen ter hoogte van de lies, enz.

Beschikbare in de volgende maten:

Klein (7.5 x 16) Middelgroot (12.5 x 25) Groot (17 x 33)



Materiaal	Stof: 91% biologisch katoen, 9% elastaan (spandex)		
	Vulling: 100% polyurethaan		
Kleur	Buff		



Confectie: PitPak cilinder - volledige vulling

Wanneer inzetbaar:

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-CYL-FP D6: lengte 15 cm omvang 18 - 23 cm
 SR-CYL-FP D6.5: lengte 16,5 cm omvang 23 - 30,5 cm
 SR-CYL-FP D8: lengte 20,5 cm omvang 28 - 38 cm
 SR-CYL-FP D9: lengte 23 cm omvang 35,5 - 43 cm



Materiaal	Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		



Confectie: PitPak cilinder - halve vulling

Wanneer inzetbaar:


JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-CYL-HP D7.5: lengte 19 cm omvang 18 - 25,5 cm
 SR-CYL-HP D8.5: lengte 21,5 cm omvang 20,5 - 30,5 cm



Materiaal	Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		

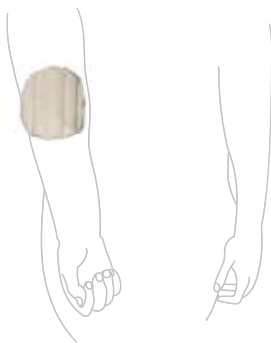

Confectie: **PitPak basisverband - rond**

Wanneer inzetbaar:


JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

RND 6: rond pak met basisstiksel, diameter 15 cm



Materiaal	Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		

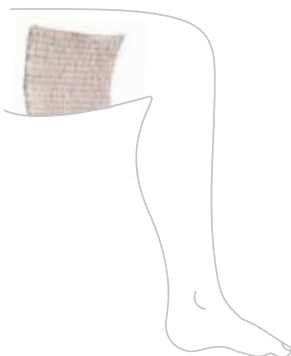

Confectie: **PitPak basisverband - rechthoekig**

Wanneer inzetbaar:

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-REC-FP 6 x 9: volledige SingleRow opvulling, rechthoek 15 x 23 cm



Materiaal	Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		



Confectie: PitPaks halvemaaanverband

Wanneer inzetbaar:

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maten:

Inframammary Pak (IMP):

Small = 21,5 x 9 cm Medium = 25,5 x 10 cm Large = 28 x 12 cm



Materiaal	Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten				
Kleur	Black		Buff		

JOBST PitPaks worden NIET vergoed

Bestelinformatie

U kunt de “Bestel- en receptformulieren” voor de verschillende JOBST JoViPak producten op jobst.nl vinden. Voor uw gemak is alle benodigde informatie hierin opgenomen. Sommige bestelformulieren bevatten meerdere pagina's en u kunt er voor confectieproducten ook informatie vinden om de juiste maat te bepalen.

In verband met de aard van maatwerkproducten is het niet mogelijk om deze achteraf aan te passen. Heeft u hulp nodig met uw bestelling? Neem dan vooral contact met ons op.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op **jobst.cs.nl@essity.com** of telefoonnummer **030 - 69 84 700**.



Ga direct naar de
downloadpagina

