



Compressie voor
wie graag
vrij
beweegt

JOBST® Confidence

Een nieuwe generatie
therapeutische elastische vlakbreikousen

**UITGEBREID
ASSORTIMENT**

JOBST® Confidence

Dankzij de innovatieve breimethode vormt de kous zich goed naar individuele **lichaamscontouren.**



Contour Fit

Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt.**



Zacht en stevig

Geavanceerd vochtregulatiesysteem voor **optimaal draagcomfort.**




Vochtbeheer

Een nieuw tijdperk van comfort met de **Contour Fit** technologie

Laat uw patiënten het verschil ervaren dat een persoonlijke pasvorm biedt voor hun dagelijkse comfort. Deze therapeutische elastische kousen, die met behulp van de Contour Fit technologie worden ontwikkeld, zijn ideaal voor patiënten met licht tot matig lymfoedeem en lipoedeem*. Ze hebben een precieze pasvorm op maat van de échte anatomische vormen van uw patiënten en bieden extra bewegingsvrijheid en comfort bij hun dagelijkse activiteiten.

INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE

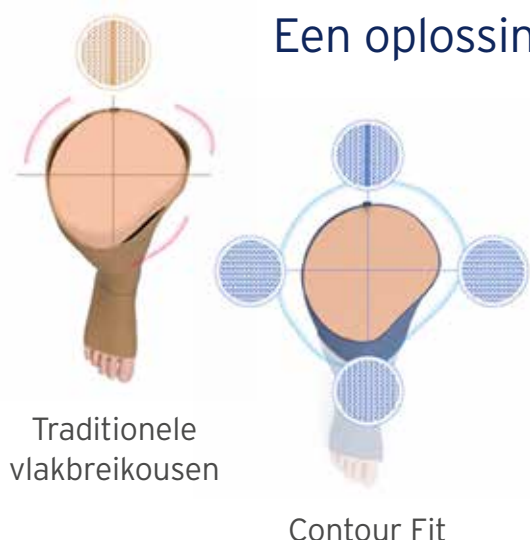

Een oplossing voor individueel comfort: **Contour Fit**

Bij traditionele vlakbreiproducten kunnen steken alleen aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd of verwijderd. Bij JOBST Confidence kunnen steken op vier posities worden toegevoegd. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de therapeutische elastische kous mogelijk.

Aan de **contour points** kunt u zien waar de therapeutische elastische kous op maat is gemaakt zodat uw patiënten zich vrijer kunnen bewegen.

Geïnspireerd op de behoeften van patiënten en ontwikkeld met **innovatieve technologie**



"Mijn patiënten zijn echt tevreden over de zachtheid van het materiaal - en tegelijkertijd biedt het de stevige druk die ze nodig hebben"

Justine Whitaker, directeur en verpleegkundig consulent, Northern Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, VK.

Het innovatieve nieuwe pantydesign

NIEUW



Onze **nieuwe modellen** hebben een ergonomische positionering van de naden die de natuurlijke vormen van **lymfoedeem- en lipoedeempatiënten** volgen. Dit kan helpen om ongemak en beperkingen in hun dagelijkse leven te verminderen.

Unieke pasvorm voor unieke patiënten

JOBST Confidence biedt als allereerste **een specifiek breipatroon voor zowel lymfoedeem- als lipoedeempatiënten.**

LIPOEDEEM



LYMFOEDEEM



Het begint allemaal met **de unieke lichaamsvorm van uw patiënten**



METEN

Beide patiënttypes **worden volgens onze richtlijnen gemeten.**



HERKENNEN

Ons productiesysteem interpreteert de metingen en **herkent** de lichaamsvorm als ofwel **lipoedeem of lymfoedeem.**



PRODUCEREN

Een speciaal breipatroon wordt geselecteerd en de innovatieve **Contour Fit** breitechniek produceert een therapeutische elastische kous met een **optimale gepersonaliseerde pasvorm.**



Stimuleer uw patiënten met comfort-, kleuren- en designopties

Comfortopties



Comfortzone knie



Comfortzone arm



Comfortzone enkel



Hallux valgus gesloten teen




Hallux valgus open teen



Schuine voet

Designopties

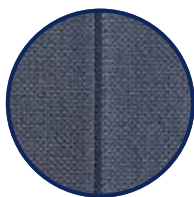

Deco line



Initialen



Tailleband met bloemmotief (5 cm)



Beige

Caramel

Red heather

Jeans heather

Anthracite heather

Black



JOBST® Confidence

Een compleet assortiment net zo uniek als uw patiënt

Uitvoeringen



CG1 armkous



AB1 Sok



AD kniekous



AG dijkous



ET Bermuda



AG-HT Monopanty



CT Capri



BIT 3/4



BT 7/8



AT Panty

Drukklasse (RAL)

Bovenste extremiteiten

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

Onderste extremiteiten

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg