

A woman with short blonde hair is sitting on a white marble surface, smiling. She is wearing an orange sleeveless top and grey leggings. On her right arm, she is wearing a blue compression sleeve with a black cuff at the wrist. The sleeve has the "JOBST" logo on it. The background shows a kitchen with white cabinets and a sink.

Nachtcompressie voor complexe casuïstiek

JOBST® JoViPak

Oplossingen voor het hele lichaam

Oplossingen voor het hele lichaam

In de onderhoudsfase kan het onder controle houden van lymfoedeem een uitdaging zijn voor de patiënt en behandelaar. Als er sprake is van pitting oedeem dat zelden verdwijnt door hoog leggen met eventueel beginnende fibrose, dan kan een compressiehulpmiddel gedurende de nacht uitkomst bieden.

JOBST JoViPak producten bevatten foamdeeltjes van wisselende grootte die zorgen voor dynamische puntdrukken en zijn ontworpen om lymfevocht af te voeren en fibrotisch weefsel te verzachten. Het assortiment is zeer breed en bevat naast maatwerkproducten voor het hele lichaam, ook pads die overdag gedragen kunnen worden. JOBST JoViPak is inzetbaar vanaf ISL 2a*.

Nachtcompressie geeft de beste resultaten wanneer het onderdeel is van het behandelplan, passend bij de gezamenlijk vastgestelde therapiedoelen. Dit vergroot de kans op een betere therapietrouw.



* The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology

Compressie waar dat nodig is

Hoofd, nek en kin

Confectie:

- Kinband standaard en uitgebreid
- Half- en volledig gezichts- en nekmasker
- Nekpads

(geen maatwerk beschikbaar)

Torso

Maatwerk:

- Schouder-Thorax verband (met of zonder padding)
- Busti
- Vest
- JoViJacket voor extra compressie

Confectie:

- Pads borst en borstwand

Genitaal gebied

Confectie:

- Genitale pads (zowel voor mannen als voor vrouwen)

(geen maatwerk beschikbaar)

Bovenste ledematen

Maatwerk:

- Armbandage - in één of twee delen
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

Onderste ledematen

Maatwerk:

- Beenbandage - hele been of onderbeen
- Hip Hugger
- Boxer Short
- JoViJacket voor extra compressie

(geen confectie beschikbaar)

JOBST JoViPads en JOBST PitPaks kunnen overal op het lichaam worden gebruikt.

JOBST® JoViPak materiaalsopties

JoViPak® stoffen

- JoViPak Arm- en Beenbandage, Schouder-Thorax, Busti: Polartec® Power Dry®, gemaakt van 100% polyester microvezelgarens. Polartec® Power Dry® draagt comfortabel dankzij de dempende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.
- JoViJacket: Powernet, gemaakt van nylon met spandex®, een sterk materiaal met beperkte rek.
- JoViPak Hip hugger, Vest, en de Hoofd, nek- en kinverbanden: gemaakt van 90% katoen en 10% Lycra®.

JoViPak schuim

- Bromidevrij
- Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte
 - 2 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Slimline kanalen
 - 4 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Standaard kanalen

Kanalen

- Standaard - ruim 3 cm tussen kanalen (4 blend foam)
- Slimline - 2,5 cm tussen kanalen (2 blend foam)
(Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner)

Bovenste ledematen

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.



Maatwerk: JoViPak Armbandage

Wanneer inzetbaar:


Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van de arm gedurende de nacht. De armbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. De JoViPak armbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan. Combineer voor optimale compressie de armbandage altijd met een JoViJacket.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard of Slimline

Opties: Armbandage in één of twee delen, rits, gestikte vingers.

Arm						
AC1	AE	AD	AG	AG1	CG1	
Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					

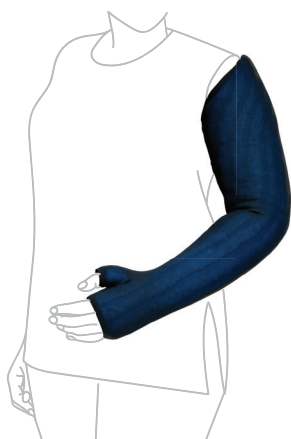

Maatwerk: JoViJacket Armbandage

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor extra compressie bij de JoViPak Armbandage. Vervang de JoViJacket na 6 maanden om optimale druk te behouden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van de armbandage.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			

Hoofd, nek en kin

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.



Confectie: Kinband standaard

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband standaard bedekt gedeeltelijk de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Universeel te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Universeel eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: Kinband uitgebreid

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de voorste/laterale delen van het gezicht. De kinband uitgebreid bedekt de oren, de zijkant van het gezicht en achter de oren. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor deze kinband de JoViPak Nekpad Peri Auricular te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri Auricular eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Nekpad universeel**

De universele JoViPak Nekpad is ontwikkeld om te worden gebruikt met de standaard kinband en helpt bij het aanpakken van bilateraal en nekoedeem, bij zwelling van de nek voor de oren.

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		




Confectie: **Nekpad Peri Auricular**

Bedekt nek plus voor- en achterkant oor. Ontwikkeld om te worden gebruikt met de verlengde kinband of het gezichtsmasker. Deze pad heeft extensies voor zowel de voorste als de achterste delen van de oren en helpt bij het verminderen van bilateraal hoofd- en nekoedeem.

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		

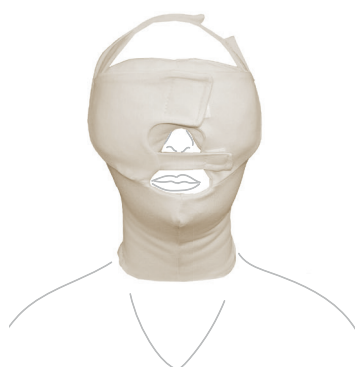

Confectie: Gezichts- en nekmasker

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. Het masker bedekt het hele gezicht, behalve de neus en de mond. Met klittenband aan de boven- en achterkant van het hoofd, bij de nek en boven de bovenlip. Met behulp van een oogpad kan extra druk rond de ogen gecreëerd worden. De verstelbare band langs de bovenste helft van het gezicht zorgt voor volledig zicht wanneer dat nodig is. Een open naad in de nek maakt het mogelijk een pad te plaatsen voor maximale therapeutische effectiviteit. Hoewel het precieze type pad afhankelijk is van de toestand van de patiënt, wordt aanbevolen voor dit masker de JoViPak Nekpad Peri Auricular te gebruiken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

U kunt de bijpassende JoViPak Nekpad Peri Auricular en Oogpad eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: Half gezichts- en nekmasker inclusief padding rechts

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het masker bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Half gezichts- en nekmasker inclusief padding links**

Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem in de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht. Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook 's nachts kan worden gedragen. Het met versnipperde foam gevulde masker met gestikt patroon creëert wisselende puntdrukken.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet gecombineerd worden met een JoViPak Nekpad.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		



Confectie: **Oogpad (+ band)**

De JoViPak Oogpad is ontworpen om bilaterale druk te geven op het orbitale gebied van het gezicht. De Oogpad kan zowel op zichzelf als gecombineerd met het gezichts- en nekmasker gedragen worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Ivory		

Torso

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.



Schouder-Thorax met thoraxpadding



Schouder-Thorax zonder thoraxpadding

Maatwerk:

JoViPak Schouder-Thorax Links/Rechts

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en naast armoedeem ook oedeem rondom de schouder en/of het bovenlichaam hebben. De JoViPak Schouder-Thorax heeft drie ritsen om hem eenvoudiger aan te kunnen trekken: een middenvoor-thoracale rits, een onderarmrits, van pols naar elleboog en een rits over de rug van het aparte handstuk.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Type: Mastectomie, Lumpectomie, Reconstructie.

Kanalen: Standaard of Slimline, horizontaal of verticaal.

Opties: Met of zonder thoraxpadding, armbandage in één of twee delen, armsling, rits, gestikte vingers.

U kunt de bijpassende JoViJacket Schouder-Thorax eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Schouder-Thorax met JoViJacket
Voor extra compressie

Maatwerk:

JoViJacket Schouder-Thorax

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Schouder-Thorax, voor maximale pasvorm en effectiviteit.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het Schouder-Thorax product.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Busti

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan en die oedeem of fibrose in de borst, borstwand en/of bovenrug hebben. De JoViPak Busti heeft een ritssluiting aan de voorkant.

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan adviseren wij het JoViPak Vest met eventueel een P-PI pad voor de ontbrekende borst.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

De Busti wordt altijd in Slimline uitvoering geleverd waardoor deze overdag kan worden gedragen.

U kunt de bijpassende JoViJacket Busti eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket Busti

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Busti.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Vest

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen om de afvoer van overtollig lymfevocht in de borst, laterale borstkas en bovenrug te vergemakkelijken na een lumpectomie, mastectomie en andere borst- of rompopoperaties. De middensluiting is van klittenband in 2 delen (gesplitst bij de taille). Voor optimaal therapeutisch effect wordt aangeraden een JOBST JoViJacket over het Vest te dragen. Het Vest kan doorlopen tot de rand van het bekken als de patiënt een natuurlijke taille heeft (kleinere omtrek bij de taille dan bij de heup). Als de patiënt geen natuurlijke taille heeft, dan wordt een Vest tot de onderste rib aangeraden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard (met 4 soorten schuim) of Slimline (met 2 soorten schuim); verticaal of horizontaal.

Opties: Halve of volledige vulling, rits, kortere versie (tot de taille).

U kunt de bijpassende JoViJacket Vest eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Katoen/Lycra®					
Kleur	Black		Ivory		Royal Blue	



Maatwerk: JoViJacket Vest

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij het JoViPak Vest, voor maximale pasvorm en effectiviteit.


Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			

Besteladvies JoViPak Vest

Continuous flow-kanalen

Voor een maximaal therapeutisch effect is het belangrijk om de kanalen in de juiste richting te plaatsen, passend bij de indicatie en de richting van mogelijke lymfe-afvoer.

Kanaal opties

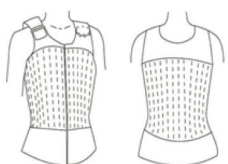


Voorkant

Achterkant

Bilateraal (dubbele vulling)

Voor patiënten met een dubbele mastectomie of lumpectomie met weinig tot geen functionele lymfeklieren in beide oksels. Continuous flow-kanalen voeren vocht distaal af naar het verzamelgebied in de lies.

Vulling opties

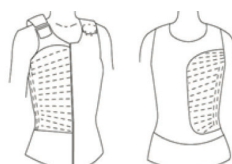

Voorkant

Achterkant

1/2 vulling unilateraal (horizontaal of verticaal)

Voor patiënten die een unilaterale mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan en borstwand-fibrose aan één kant hebben. De foamvulling met Continuous flow-kanalen strekt zich tot over de verticale achter- en voorwaterscheidingen. U bestelt deze rechts- of linkszijdig.



Confectie: **JoViPad Belisse Axilla mini**

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie in de oksel. Een losjes gevulde pad met een verlengstuk dat de afvoer van lymfevocht stimuleert. De pad kan in combinatie met het JoViPak Vest, een compressiebeha of compressiehemd gebruikt worden. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Post-Mastectomy

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met borstwand-oedeem en/of stralingsfibrose over de voorste borstwand en de serratus anterior, maar met een normale lymfedrainage aan de niet-aangedane zijde. De pad bedekt de aangedane borstwand helemaal. Kan gebruikt worden onder een compressiehemd en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Serratus Anterior

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een mastectomie hebben ondergaan met oedeem en/of stralingsfibrose op de borstwand. Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of compressiehemden of prothesebeha's (onder de prothese) en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.


Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		

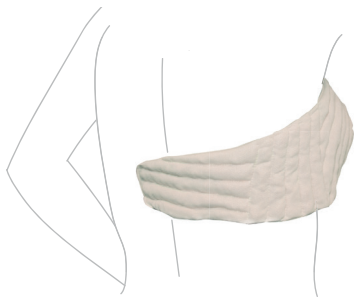

Confectie: JoViPad Post-Lumpectomy



Wanneer inzetbaar:

Voor oedeem en/of stralingsfibrose van de aangedane borst en/of borstwand. De pad bedekt de aangedane borst volledig en strekt zich uit tot aan de wervelkolom. Past onder de meeste compressiehemden en is met name geschikt voor gebruik tijdens de nacht. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

Cupmaat:

Small vanaf cup A/B
Medium vanaf cup C
Large vanaf cup D/DD
XLarge vanaf cup E/F

Lengte van sternum tot ruggengraat:

Small lengte 46 cm
Medium lengte 50 cm
Large lengte 55 cm
XLarge lengte 66 cm

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Belisse Inframammary



Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten die een lumpectomie hebben ondergaan met oedeem en/of fibrose aan de onderzijde van de borst. De ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus en geeft zachte puntdruk-massage aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een compressiebeha gebruikt worden en is met name geschikt voor gebruik overdag. De pad voelt zacht aan tegen de huid en is comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Dit product kan niet los gebruikt worden.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		

Genitaal gebied

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.

Deze JOBST JoViPads zijn ontworpen om comfort te bieden aan vrouwen en mannen die lijden aan oedeem en/of fibrose in de liesstreek, schaamlippen of het scrotum. De met versnipperde foam gevulde pads met gestikt patroon creëren wisselende puntdrukken bij gebruik onder compressiekleding. De pads zijn ontworpen om de afvoer van lymfevocht te stimuleren en fibrotisch weefsel te verzachten.



Confectie: JoViPad Genitale Vrouw

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Genitale Vrouw is ontworpen om oedeem en/of fibrose in de schaamlippen en/of de liezen te helpen verminderen. De voorzijde is ontworpen om tegelijkertijd een hysterectomielitteken te kunnen bedekken. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiebroek.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Genitale Man

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Genitale Man is ontworpen om oedeem en/of fibrose in het scrotum en/of de liezen te helpen verminderen. De pad heeft elastiek aan de zijkanten zodat deze makkelijk op zijn plaats blijft zitten. De pad wordt bij voorkeur direct op de huid gedragen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Noot:

Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiebroek.

Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		

Onderste ledematen

We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze afdeling Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager.



Maatwerk: JoViPak Beenbandage

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor effectief (lymf)oedeemmanagement van het been gedurende de nacht. De beenbandage stimuleert de afvoer van lymfevocht en helpt fibrotisch weefsel te verzachten. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. Een JoViPak beenbandage is een duurzaam compressieproduct en kan bij zorgvuldig gebruik lang meegaan. Combineer voor optimale compressie de beenbandage altijd met een JoViJacket.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Opties: Tot de tenen, rits.

U kunt de bijpassende JoViJacket Been eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Been						
AB1	AD	AF1	AG	AG1	DG1	
Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket Beenbandage

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Beenbandage, met antislipzool.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Boxer

Wanneer inzetbaar:

Voor patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem. De JoViPak Boxer kan met een JoViPak Beenbandage of JOBST Relax gecombineerd worden. Ontworpen om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren. Combineer voor maximaal resultaat de JoViPak Boxer met een JoViJacket.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

U kunt de bijpassende JoViJacket Boxer eenvoudig via hetzelfde bestelformulier bestellen.

Materiaal	Polartec® Power Dry®					
Kleur	Black		Navy Blue		Royal Blue	
	Buff		Plum		Stainless steel	
	Pink					



Maatwerk: JoViJacket Boxer

Wanneer inzetbaar:

Voor extra compressie bij de JoViPak Boxer, al dan niet in combinatie met een beenbandage.

Materiaal	Powernet					
Kleur	Black		White			



Maatwerk: JoViPak Hip hugger

Wanneer inzetbaar:

Ontworpen voor patiënten die hoog op het been tot in de heup oedeem hebben, om de afvoer van lymfevocht en verzachting van fibrotisch weefsel te stimuleren. Comfortabel dankzij het polsterend effect. De JoViPak Hip Hugger kan met een JoViPak Beenbandage of JOBST Relax gecombineerd worden.

Beschikbaar in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal	Katoen/Lycra®					
Kleur	Black		Ivory		Royal Blue	



Aantrekhelp (Dycem anti-slip mat)

Wanneer inzetbaar:

Als hulpmiddel voor het aantrekken van een JoViPak product.

De JoViPak Aantrekhelp wordt NIET vergoed.



Confectie: JoViPad Foam POP

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam POP is ontworpen om lokaal druk te verhogen bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze ovale pad is geschikt voor gebruik in de gevoelige knieholte of voorzijde van de enkel. De pad is ook geïndiceerd voor patiënten die lokaal druk nodig hebben bijvoorbeeld op de voetrug of andere kleine gebieden met fibrose.

Beschikbaar in de volgende maten:

Eén maat: 12,5 x 20 cm

Noot:

Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiehulpmiddel.



Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		



Confectie: JoViPad Foam KDNV

Wanneer inzetbaar:

De JoViPad Foam KDNV is ontworpen om lokaal druk te verhogen bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen van oedeem en/of fibrose. Deze niervormige pad is geschikt voor gebruik in gebieden zoals de laterale borst ter hoogte van de oksel, de distale voorzijde van de knie, de binnenkant van het bovenbeen ter hoogte van de lies of de bovenzijde van het pubisgebied.

Beschikbaar in de volgende maten:

Klein (7.5 x 16) Middelgroot (12.5 x 25) Groot (17 x 33)

Noot:

Voor een maximaal resultaat moet dit product worden gecombineerd met een compressiehulpmiddel.



Materiaal	Katoen/Lycra®		
Kleur	Buff		

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of lipodermatosclerose. De PitPaks zijn gevuld met een speciale pitvulling die stevige massage van het aangedane gebied mogelijk maken. JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

PitPak cilinder - volledige vulling

Beschikbaar in de volgende maten:

- SR-CYL-FP D6: lengte 15 cm omvang 18 - 23 cm
- SR-CYL-FP D6.5: lengte 16,5 cm omvang 23 - 30,5 cm
- SR-CYL-FP D8: lengte 20,5 cm omvang 28 - 38 cm
- SR-CYL-FP D9: lengte 23 cm omvang 35,5 - 43 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		



PitPak cilinder - halve vulling

Beschikbaar in de volgende maten:

- SR-CYL-HP D7.5: lengte 19 cm omvang 18 - 25,5 cm
- SR-CYL-HP D8.5: lengte 21,5 cm omvang 20,5 - 30,5 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		



PitPak basisvorm - rond

Beschikbaar in de volgende maat:

- RND 6: rond pak zonder kanalen, diameter 15 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		




PitPak basisvorm - rechthoekig

Beschikbaar in de volgende maat:

SR-REC-FP 6 x 9: rechthoek 15 x 23 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		

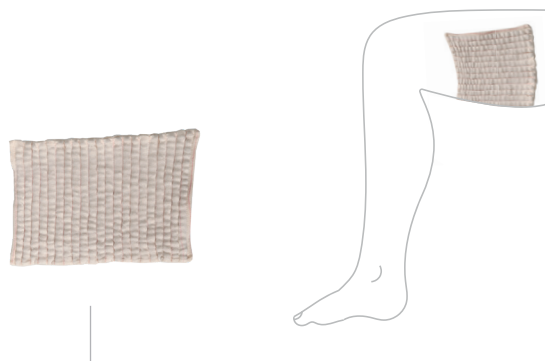

PitPak halvemaaanverband

Beschikbaar in de volgende maten:


Inframammary Pak (IMP):

Small = 21,5 x 9 cm

Medium = 25,5 x 10 cm

Large = 28 x 12 cm

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		

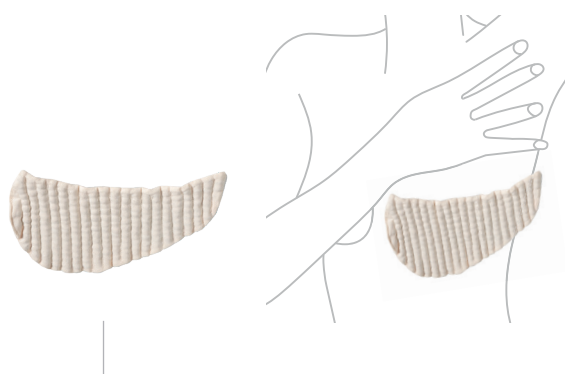

PitPak Handpakking

Beschikbaar in de volgende maat:

DRSM 4 x 5

Materiaal	Katoen/Lycra®, gevuld met kersenpitten		
Kleur	Buff		



Bestelinformatie

U kunt de “Bestel- en receptformulieren” voor de verschillende JOBST JoViPak producten op jobst.nl vinden. Voor uw gemak is alle benodigde informatie hierin opgenomen. Sommige bestelformulieren bevatten meerdere pagina's. Ook bevatten de formulieren informatie om de juiste maat te helpen bepalen.

In verband met de aard van maatwerkproducten is het niet mogelijk om deze achteraf aan te passen. Confectieproducten mogen alleen in de originele plastic verpakking gepast worden en eventueel omgeruild. **Aangebroken verpakkingen worden niet retour genomen.** Heeft u hulp nodig met uw bestelling? Neem dan vooral contact met ons op.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op jobst.cs.nl@essity.com of telefoonnummer **030 - 69 84 700**.



Ga direct naar de
downloadpagina



JOBST®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl



01984062M